



NY Genesis II +



**Forbedringer Genesis II+
vår største suksess er blitt enda bedre.**

- Pyramiden er nå plassert i nøytral posisjon, dette fordi dagens brukere ikke bruker sko med like høy hel som tidligere.
- Nye støtdempere med en blanding av gummi og polyuretan på molykulært nivå, noe som gjør dem tilnærmet uslitelige. Vi tilbyr livstidsgaranti på bumpere.
- Lavere : Genesis er 1 cm lavere en tidligere modell.
- Lettere : 34% vektreduksjon fra 720 g til 470 g.
- Kosmetikk Genesis foten har fått ny kosmetikk

Teknisk informasjon:

- Høyde 12 cm til topp pyramide
- Helhøyde 0-2 cm
- Størrelser i dame utførelse 21-26
- Størrelser i herre utførelse 21-30
- Brukervekt inntil 125 kg
- Brukervekt inntil 150 kg ved lav aktivitet

- Vekt inkl kosmetikk 622 gram for str 26
- Abduksjon 7°-12°
- Adduksjon 7°-12°
- Inversjon 12-15°
- Eversjon 12-15°
- Dorsal fleksjon 7-15°
- Plantar fleksjon 20-30°



TSS II vaculink

*For dem som ønsker justerbart
Ekstra vakuum.
Passer alle Genesis.*

Genesis II+ egner seg godt for bruk i terrenget.

Det er en behagelig fot som føles sikker og naturlig i daglig bruk.


Genesis II+ er multiaksial.

Den fremre bumperen gjør det lettere for brukeren å rulle over fra hæl til tå, det gjør det mye enklere å gå spesielt i oppoverbakker .

Sidebumpere tar opp ujevnheter fra siden.

Bakre bumper gir foten en stabil og god posisjonering i nedoverbakker og på flater.

Genesis II + er utstyrt med en karbonplate som lagrer energi når brukeren beveger seg fremover, for å frigi energien ved fraspark .

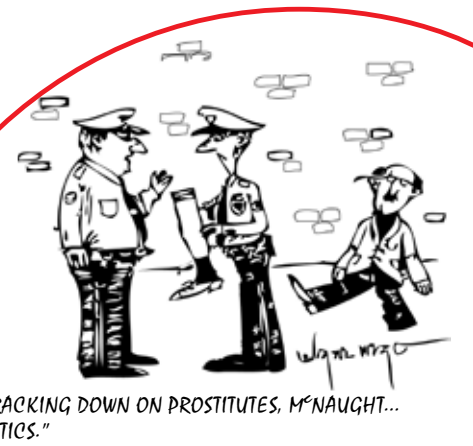

VI FORHANDLER OGSÅ:

- ✓ **Proteser**
- ✓ **Ortoser/Skiner**
- ✓ **Innleggsåler**

- ✓ **Karbonføtter og knær**
- ✓ **Kompresjonstrømper**
- ✓ **Aktivortoser**

