

mini
blade
XT



VANNETT

Hold tempoet oppe
med Mini BladeXT



endolite



“Jeg kan stå stille, jeg kan gå og jeg kan hoppe på trampoline. Jeg liker den lyse fargen veldig godt. Mini BladeXT er alt jeg trenger!” Izzy

Bli med på moroa!

mini
blade
XT

For ungdommen går livet stadig videre. Den mest krevende brukeren må ha rett utstyr for å møte behovet for en aktiv livsstil, enten det er å gå på skolen, tilbringe tid med venner, løpe, sykle eller delta i andre idretter.

Mini BladeXT er designet for å tilby en komplett løsning, herunder enestående stabilitet, bakkegrep og forbedret komfort med tå-tilpasset såle med godt grep. Den C-formede skotuppen gir optimal energirespons.

Mini BladeXT tilbys i blendende rosa eller elektrisk blå. Den er det ideelle valget for barn og kan være den eneste foten de trenger!





Optimal energirespons

Den kurveformede skotuppen fungerer som en spent fjær for å bidra til fremdrift. Fra første steg komprimeres og lagres energi i den C-formede kurven, så den er klar til å frigjøre energi ved neste steg.

Beskyttelse og stabilitet

Den unike tå- og hældesignen gjør at du føler deg balansert og sikker når du står, løper eller skifter retning. Dette sikrer også støtdemping for komfort og beskyttelse i hvert steg.

Sikkerhet og funksjonalitet

En integrert gripesåle bidrar til sikkerhet og trygghet under enhver aktivitet. Tåtilpasningen forbedrer underlagsfunksjonaliteten, og gir fleksibilitet og økt komfort på ujevnt underlag.

Lys og fargerik overflate

Mini BladeXT tilbys i blendende rosa og elektrisk blått, som er attraktivt og morsomt for yngre brukere.

Vanntett

Har du hoppet i sølepytten? Skyll Mini BladeXT med ferskvann etter bruk på skitne steder og/eller utsatt for salt eller klorvann.

Lett og sterk

Den lette konstruksjonen holder deg ikke tilbake. Mini BladeXT er laget av e-karbon som gjør den sterk, men samtidig fleksibel og brukervennlig.



“ Jeg føler meg mer selvsikker. Jeg kan løpe raskere og være mer aktiv med brødrene mine. ” Cody



Naturlig bevegelse

Nå du overfører vekten din til Mini BladeXT, komprimeres hælfjæren slik at den absorberer støt for bedre komfort og stabilitet under tidlig bevegelsesfaser. Dette sikrer en jevn rullefase og sømløs spenning av tåfjæren, som består av e-karbon. I de siste bevegelsesfasene frigjøres den lagrede energien som fremdrift over i neste steg. Sluttresultatet er en mer balansert, symmetrisk og energieffektiv gangart.

Egenskaper

- Doble tå- og hælfjær
- Split-tå design
- Gripesåle
- Stivhetskile på hælen
- Vanntett
- Reservepakke for hælfjæren
- Minipyramide for herrer, med 30mm forskyvning og rotasjon



Og for store barn...

Mora er ikke over når du har vokst fra Mini BladeXT. Voksenutgaven BladeXT er neste trinn på reisen. Den tilbys med 9 fjæringsgrader og er egnet for brukere opp til 166kg.



Tilpassing

Mini BladeXT tilbys i myk, middels og fast fjæringsgrad, og er egnet for brukere som veier opptil 60 kg. A/P-forskyvningspyramideforbindelsen gjør personlig tilpasning mulig. Den som ønsker en stivere hæl kan velge en hælkle. Mini BladeXT kan utstyres med minipyramideadapteren for kvinner, som tilbys i 25mm eller 30mm størrelse. Det gjør at den kan skreddersys til de valgte systemkomponentene.

Spesifikasjon

Brukervekt:	20-60kg
Amputeringsnivå:	alle
Aktivitetsnivå:	3-4
Fjæringsgrad:	1-3
Komponentvekt:	450g (inkludert minipyramiden for herrer)
Konstruksjonshøyde:	168mm
Fargevalg:	Blendende rosa (R) og elektrisk blått (B)
Garanti:	12 måneder (gjelder ikke for malte flater eller sålebelegg)

Bestillingsforslag

MBXTA B 3 SM Ordre-eksempel: Mini BladeXT, Farge Blå, Fjæringsalternativ 3
Blå Fjæringsvalg

Aktivitet	Brukervekt			kg
	20-35	36-50	51-60	
4	44-77	78-110	111-132	lbs
	1	2	3	Fjæring for tå og hæl
	Myk	Middels	Fast	



Adaptore

Minipyramide for herrer (med fot): 189627

Minipyramide for kvinner, 25mm slangeklemmeadapter: 189526



inipyramide for kvinner, 30mm slangeklemmeadapter: 189727




Reservepakke for hælfjæring

- 1 (myk) – 539084SS
- 2 (middels) – 539084MS
- 3 (fast) – 539084FS



Bygghøyde

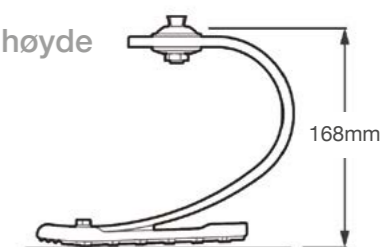

Follow Blatchford:

 @BlatchfordGrp

 /BlatchfordGrp

blatchford.co.uk

0114 263 7900

sales@blatchford.co.uk



Endolite is part of the Blatchford Group. Registered address, Chas A Blatchford & Sons Ltd, Unit D, Antura, Kingsland Business Park, Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom. t: +44 (0) 1256 316600 f: +44 (0) 1256 316710



An annual visual inspection is recommended. Check for visual defects that may affect proper function. Maintenance must be carried out by competent personnel.