

Produktfordeler SoftSkin-liner

- Anvendelse av medisinsk silikon
- Stor tilpasningsmulighet (19 størrelser)
- Funksjonelt og stabilt tekstilmateriale
- Beholder passform
- Tåler vaskemaskin (30°C)
- Puster (SoftSkin Air®)
- Tilgjengelig med eller uten distalt feste

Pasient Markus M. Huber (Fikk amputert leggen i 2008)

"SoftSkin Air® er mitt førstevalg når det gjelder silikon-liner."

OT-tekniker A. Tetzlaff (har siden 2015 regelmessig lagt inn SoftSkin Air® liner)

"Det som overbeviste meg var den enkle behandlingen og det høye antallet positive tilbakemeldinger fra pasienter". "SoftSkin Air® gir pasienten betydelig større sikkerhet ved bruk."

SoftSkin og SoftSkin Air® Linerstandard for legg og lår.



SoftSkin – Nyeste generasjon av silikon-liner

I flere år har SoftSkin silikon-liner vært i daglig bruk både av lår- og leggpasienter. Anvendelse av medisinsk silikon i forbindelse med et progressivt støttetekstil gjør det mulig å legge inn SoftSkin silikon-liner på et høyt antall pasienter. Det ytterst holdbare progressive støttetekstilet sørger for en lik fordeling av trykket fra stumpen i hele lineren. I det distale området blir ved hjelp av en spesiell maskeanordning lengdebevegelsen (forlengelsen) minimert. En anvendelse av en indre matrise er ikke lenger nødvendig.

SoftSkin Air® – lineren som puster

Tradisjon møter innovasjon

Med utviklingen av SoftSkin Air® har det for første gang lyktes å framstille en silikon-liner som puster. Den er spesielt særpreget ved at det er laget mikroporer på silikon-liner som på sikker måte leder bort fuktigheten fra huden (svetten). Resultatet er både merkbart tørr hud og lavere hudtemperatur. SoftSkin Air® fester seg merkbart bedre til den tørre huden og reduserer dermed faren for ufrivillig utglidning av lineren. Nettopp pasienter som svetter mye i konvensjonelle linere vet å verdsette disse fordelene med SoftSkin Air. En annen fordel med SoftSkin Air er at luft som er presset sammen i ujevn hud kan ledes ut slik at det ikke så lett oppstår blemmer.

Rev. 5-2016-4_49001010301003

Uniprox GmbH & Co. KG
Heinrich-Heine-Straße 4
07937 Zeulenroda-Triebes

Tlf: +49 (0) 36628-66-33 00
Fax +49 (0) 36628-66-33 55
E-post: info@uniprox.de

Kundeservice 0800-001 05 40*
Teknisk service 0800-001 05 41*
Telefaks 0800-001 05 45*

* Kostnadsfritt innenfor Tyskland


Kundeservice Østerrike +43-810 40 40
Telefax Østerrike +43-810 40 41

SoftSkin S30

Den myke lineren



- Hardhet 30
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 370 mm
- Myk linerpolstring
- Gode føringsegenskaper for silikon
- Høy komfort og enkel håndtering
- Passer for pasienter i mobilitetsklasser 1-3
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Nytt tekstilstrikk i distalt område gir godt feste (ingen indrematrise er nødvendig)
- Mansjett av rustfritt stål
- Linerholder medfølger

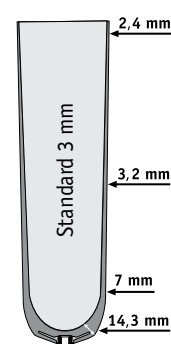

Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
S30- Størrelse	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	med distalt feste
S30CL- Størrelse	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	uten distalt feste


Eks.: SoftSkin S30CL i størrelse 25 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!

SoftSkin Air® S30

Silikon-lineren som puster



- Hardhet 30
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 370 mm
- Myk linerpolstring
- Mindre svettedannelse gjennom mikroporene
- Mer behagelig og lengre brukskomfort
- Økt sikkerhet ved bedre feste
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Nytt tekstilstrikk i distalt område gir godt feste (ingen indrematrise er nødvendig)
- Mansjett av rustfritt stål
- Linerholder medfølger

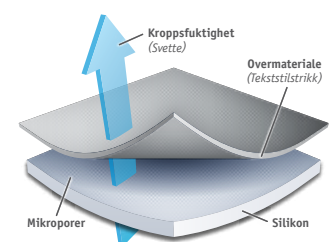

Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
S30- Størrelse -Air	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	med distalt feste
S30CL- Størrelse -Air	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	uten distalt feste


Eks.: SoftSkin Air® S30 i størrelse 36 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!

SoftSkin S40

Den komfortable lineren



- Hardhet 40
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 370 mm
- Myk linerpolstring
- God festeevne for silikon
- Høy komfort og enkel håndtering
- Passer for pasienter i mobilitetsklasser 1-3
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Nytt tekstilstrikk i distalt område gir godt feste (ingen indrematrise er nødvendig)
- Med distalt feste
- Mansjett av rustfritt stål
- Linerholder medfølger

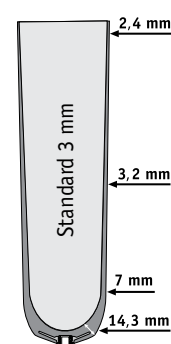

Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
S40- Størrelse	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	med distalt feste
S40CL- Størrelse	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	uten distalt feste


Eks.: SoftSkin S40CL i størrelse 25 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!

SoftSkin Air® S40

Silikon-lineren som puster



- Hardhet 40
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 370 mm
- Myk linerpolstring
- Mindre svettedannelse gjennom mikroporene
- Mer behagelig og lengre brukskomfort
- Økt sikkerhet ved bedre feste
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Nytt tekstilstrikk i distalt område gir godt feste (ingen indrematrise er nødvendig)
- Mansjett av rustfritt stål
- Linerholder medfølger

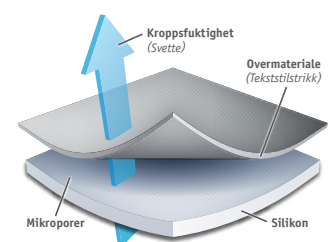

Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
S40- Størrelse -Air	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	med distalt feste
S40CL- Størrelse -Air	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	uten distalt feste

Eks.: SoftSkin Air® S40 i størrelse 36 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!

SoftSkin S50

Den aktive lineren



- Hardhet 50
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 370 mm
- Fast silikon stabiliserer mykdelene
- Forbindelse fra fast silikon og tekstilstrikk gir optimal holdbarhet
- Passer for pasienter i mobilitetsklassene 2-4
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Nytt tekstilstrikk i distalt område gir godt feste (ingen indrematrise er nødvendig)
- Med distalt feste
- Mansjett av rustfritt stål
- Linerholder medfølger



Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
S50- Størrelse	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	med distalt feste
S50CL- Størrelse	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	uten distalt feste


Eks.: SoftSkin S50CL i størrelse 25 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!

SoftSkin Air® S50

Silikon-lineren som puster



- Hardhet 50
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 370 mm
- Fast silikon stabiliserer mykdelene
- Mindre svettedannelse gjennom mikroporene
- Mer behagelig og lengre brukskomfort
- Økt sikkerhet ved bedre feste
- Forbindelse fra fast silikon og tekstilstrikk gir optimal holdbarhet
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Nytt tekstilstrikk i distalt område gir godt feste (ingen indrematrise er nødvendig)
- Mansjett av rustfritt stål
- Linerholder medfølger

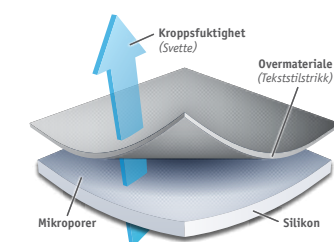

Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
S50- Størrelse -Air	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	med distalt feste
S50CL- Størrelse -Air	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	uten distalt feste

Eks.: SoftSkin Air® S50 i størrelse 36 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!

SoftSkin TF

Den komfortable lineren



- Hardhet 40
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 350 mm
- Myk linerpolstring
- Fleksibel tilpassing til hudformen ved høy tverrelastisitet
- Spesiell kombinasjon av strikken reduserer effektiv lengdebevegelsen
- Passer for pasienter i mobilitetsklassene 1-4
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Med distalt feste
- Linerholder medfølger



Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
STF- Størrelse	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55	med distalt feste


Eks.: SoftSkin TF i størrelse 45 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!
Bestillingsnr. STF-45

SoftSkin Air® TF

Silikon-lineren som puster



- Hardhet 40
- Tykkelse 3 mm
- Lengde 350 mm
- Myk linerpolstring
- Mindre svettedannelse gjennom mikroporene
- Mer behagelig og lengre brukskomfort
- Økt sikkerhet ved bedre feste
- Fleksibel tilpassing til hudformen ved høy tverrelastisitet
- Spesiell kombinasjon av strikken reduserer effektiv lengdebevegelsen
- Lett å rulle på lineren med tekstildekke
- Linerholder medfølger

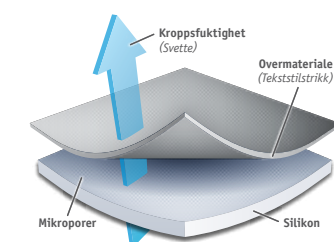

Bestillings-nr.	Størrelser på lager	Beskrivelse
STF- Størrelse -Air	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55	med distalt feste

Eks.: SoftSkin Air® TF i størrelse 36 Omkretsen måles 4 cm over den distale huden!
Bestillingsnr. STF-36-Air