



KX06

For de store opplevelsene

Blatchford 

KX06 er designet
for å ta deg
med på de store
opplevelsene.

Laget for å tåle de mest
krevende aktivitetene og
de tøffeste forholdene,
sørger KX06 for at du
takler alt fra dagliglivet
til et aktivt friluftsliv.

KX06 gir den aktive
brukeren en robust og
vanntett løsning, som
kombinerer enestående
stabilitet med jevn og
forutsigbar funksjon.



Vi lanserer

NYE K

X06





Stabilt uansett terreng

KX06 er designet for å sikre god stabilitet og bevegelse i alt terreng. Kneets utforming gjør at stumplengden reduseres under svingfasen, og dermed øker bakkeklaringen og reduserer risikoen for fall. Med hydraulisk styring vil kneet naturlig tilpasse seg din hastighet, og sørge for en jevn og forutsigbar funksjon som gir økt trygghet i bakker og trapper.



Robust design

Det nye KX06 er mer elegant, mer solid og har lavere konstruksjonshøyde. Aluminiumrammen med forsterkede lagre, gjør KX06 enda mer robust og har en brukervekt på opptil 150 kg. De selvjusterende lagrene beskytter sylindren mot sidebelastninger og forlenger på den måten kneets holdbarhet.



Komfort og stil

Silikondekselet gir et rent ytre, samtidig som det beskytter kneet. Den store fleksjonsvinkelen på 160 grader gjør det lettere å flytte benet når det er trangt, som for eksempel i bilen eller under et bord.



Flere brukermøduser

KX06 gir muligheten til å bytte fra normal funksjon til sykkelmodus med frisving eller fleksjonslås. Når fleksjonslåsen er aktivert, låser den kneet på flatt eller skrånende underlag og fører til jevnere belastning og forbedret stabilitet og holdning, ved at belastningen på det friske benet og korsryggen reduseres.



Enkelt vedlikehold

KX06 tåler tøffe forhold, det være seg vann, skitt eller sand. Ikke vær redd for den gjørmete sykkelturen – bare skyll med rent vann og tørk av!



Passer perfekt med ...

Blade^{XT} og Elite Blade

Blade^{XT} og Elite Blade tilbyr lette og dynamiske løsninger for aktive brukere.

Hydrauliske proteseankler

Blatchfords hydrauliske teknologi gir en jevn, trygg og naturlig gange som er helsefremmende på lang sikt.




Teknisk spesifikasjon

Aktivitetsnivå	3–4
Maksimal brukervekt	150 kg (AL3) og 145 kg (AL4)
Konstruksjonshøyde	220 mm
Vekt	1,34 kg (eks. deksel)
Knefleksjon	160°
Garanti	36 måneder

Bestillingsinformasjon

Artikkelnummer	KX06V2
-----------------------	--------

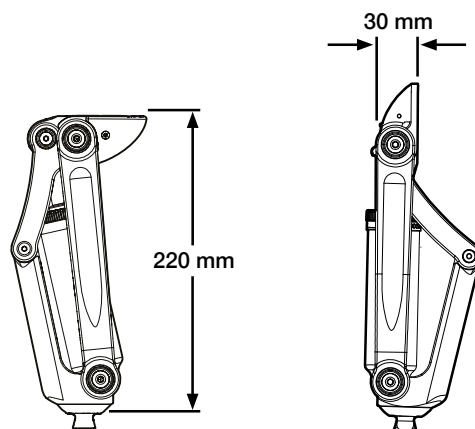



En årlig visuell inspeksjon er anbefalt. Se etter visuelle defekter som kan gå ut over funksjonen. Vedlikehold må utføres av kompetent personell. Sjekk gjerne med ditt ortopediske verksted om du trenger spesiell trening eller opplæring for du begynner med nye aktiviteter.

Distribuert av

Ortopro:

+47 55 91 88 60 | post@ortopro.no

Ortopro, Seksjon 17, Hardangervegen 72, 5224 Nesttun.

@OrtoproAS | ortopro.no

336343583NO Iss1 07/20. Informasjonen var riktig på tidspunktet for trykking.

Blatchford