



NYE KX06

Nye KX06 er et robust polysentrisk 4-akset kne med hydraulisk pumpe som sikrer aktive brukere en jevn, forutsigbar bevegelse og god stabilitet i alt terreng.

Vanntett konstruksjon gjør KX06 godt egnet for aktive brukere som trenger et pålitelig kne som tåler våte, gjørmete eller støvete omgivelser.



Hva er nytt?

- ✓ Robust konstruksjon
- ✓ 10 mm kortere konstruksjonshøyde
- ✓ Vanntett
- ✓ Bredt utvalg av proksimale adaptere
- ✓ Selvjusterende lagre beskytter sylindere fra sidebelastninger
- ✓ Forsterkede lagre
- ✓ Lås som forhindrer at kneet løser seg ut i svingfasen
- ✓ Beskyttelsesdeksel




Egenskaper

Stabil i alt terreng	Robust konstruksjon	Brukervennlig
4-akset stabilitet gir sikker bruk i alt terreng	Tåler krevende aktiviteter	Finjustering av svingfasen
Polysentrisk konstruksjon for optimal svingklaring	Kraftig aluminiumsramme med brukervekt opptil 150 kg	Enkel veksling mellom sykkel-, gange og låst ståmodus.
Hydraulisk styring sikrer jevn gange	Vannnett*	Kompatibel med en rekke eksisterende adaptere, inkludert A-P for optimal justering
Multihastighet stabilitet	Beskyttelsesdeksel	
Stor bøyingsvinkel		

*Tåler ferskvann. Enheten må låses.

Tekniske spesifikasjoner

Aktivitetsnivå	3–4
Maksimal brukervekt	150 kg (AL3) og 145 kg (AL4)
Konstruksjonshøyde	220 mm
Vekt	1,34 kg (deksel)
Knefleksjon	160°
Garanti	36 måneder

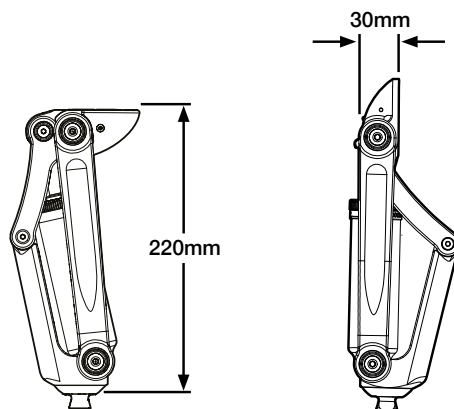

Bestillingsinformasjon

Artikkelnummer	KX06V2
-----------------------	--------